

Все для эндохирургии
Производство, продажа, сервис




Лапароскопия

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул.Восстания, 100, корп.41а
т. (843)203-58-38
ф.(843)570-81-46
info@eleps.ru

8 800 700 87 03
бесплатный звонок по России
eleps.ru

Полноценное импортозамещение

отечественный
производитель

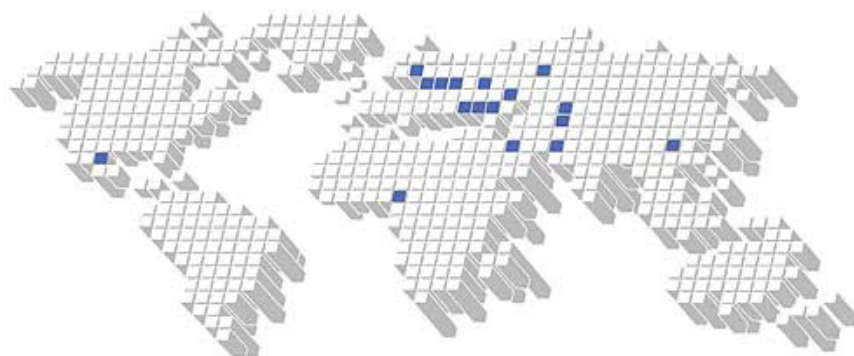



лучшее соотношение
цены и качества

гарантия
бесперебойной
работы

«ЭлеПС» — компания, стоявшая у истоков развития эндохирургии в России. На сегодняшний день «ЭлеПС» является компанией полного цикла, осуществляющей производство всех элементов эндохирургического комплекса – приборов, эндоскопов и инструментов.

Компания успешно конкурирует с ведущими зарубежными производителями медицинской техники не только на российском рынке, но и за рубежом, предоставляя потребителю лучшее соотношение цены и функционального содержания.

Уникальная программа сервисной поддержки «Гарантия бесперебойной работы», с предоставлением подменного оборудования, позволяет не прерывать работу лечебных учреждений на время технического обслуживания и ремонта.

Наличие одного из самых больших инженерно-конструкторских подразделений позволяет успешно реализовывать программы поддержки здравоохранения на стыке информационных, инженерных и технологий современного менеджмента.

Лапарокомплекс



В зависимости от комплектации соответствующим набором инструментария (подробный перечень на eleps.ru), базовый лапароскопический комплекс позволяет осуществлять вмешательства в следующих областях:

- абдоминальная хирургия
- торакальная хирургия
- лапароскопическая гинекология

Оптика **ELEPS**

- Лапароскоп Ø10 мм: 0° и 30° арт. 101030-AC-S и арт. 101030A-AC-S
- Лапароскоп Ø 5 мм: 30° арт. 501018A-AC-S
- Кабель осветительный эндоскопический КОЭ-50-240 арт. КОЭ-50-240

Оборудование **ELEPS**

- Видеокамера эндоскопическая ЭВК-003(81) "ЭлеПС" (Full HD) арт. EVK-003(81)
- Осветитель эндоскопический OSV-01 "ЭлеПС" арт. OSV-01
- Инсуффлятор электронный эндоскопический ИЭЭ-1/30-"ЭлеПС" (40 литров) арт. I-250-40AU
- Аспиратор-ирригатор эндоскопический АИЭ-15/15-"ЭлеПС" арт. AI-250-02
- Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300 "ЭлеПС", (многофункциональный, со СПРЕЙ функцией) арт. AE-300-02 .1

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул.Восстания, 100, корп.41а
т. (843)203-58-38
ф.(843)570-81-46
info@eleps.ru

8 800 700 87 03
бесплатный звонок по России
eleps.ru




Неавтоклавируемые эндоскопы

Рабочая длина, мм	Диаметр, мм	Угол зрения, град.	Артикул
300	5	0	501018
300	5	30	501018A
290	6,5	0	651024
290	6,5	30	651024A
320	10	0	101030
320	10	30	101030A
320	10	45	101030B



Автоклавируемые эндоскопы (сапфировое стекло)

Рабочая длина, мм	Диаметр, мм	Угол зрения, град.	Артикул
300	5	0	501018-AC-S
300	5	30	501018A-AC-S
320	10	0	101030-AC-S
320	10	30	101030A-AC-S
320	10	45	101030B-AC-S

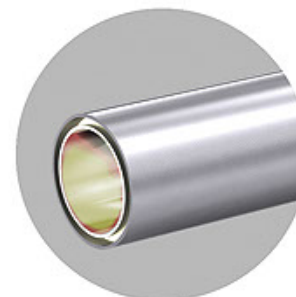

Светодиодные (LED) эндоскопы

Рабочая длина, мм	Диаметр, мм	Угол зрения, град.	Артикул
300	5	0	501018-L
300	5	30	501018A-L
290	6,5	0	651024-L
290	6,5	30	651024A-L
320	10	0	101030-L
320	10	30	101030A-L



Качество и надежность, проверенные годами практики
 Расширенная гарантия (однократная замена / ремонт при случайном повреждении)
 Оперативная диагностика и ремонт от производителя
 Обмен старых оптических трубок на новые со скидками до 50%

ЭНДОВИДЕОСИСТЕМЫ

EVK-001 (HD)
EVK-001 (HD) V



NEW

Эндоскопическая видеокамера ЭВК-001 (HD)

Со встроенным устройством записи изображения

чистое и четкое изображение в формате HD помощью CMOS матрицы

HD разрешение 1280x720 pixels (16:9)

прогрессивное сканирование 720 p

функция сохранения снимка экрана на подключенный USB-Flash накопитель, благодаря встроенному устройству записи

изображение с эндоскопической камеры может формироваться одновременно на трех экранах, т.к. камера имеет три видеовыхода

NEW

Эндоскопическая видеокамера ЭВК-001 (HD) V

Со встроенным устройством записи изображения и вариофокальным объективом

камерная головка видеокамеры снабжена объективом с переменным фокусным расстоянием

HD разрешение 1280x720 pixels (16:9)

прогрессивное сканирование 720 p

функция сохранения снимка экрана на подключенный USB-Flash накопитель, благодаря встроенному устройству записи

изображение с эндоскопической камеры может формироваться одновременно на трех экранах, т.к. камера имеет три видеовыхода

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул. Восстания, 100, корп. 41а
т. (843) 203-58-38
ф. (843) 570-81-46
info@eleps.ru

Полноценное импортозамещение
Уникальное соотношение цены и качества
Сервис "Гарантия бесперебойной работы"



Full HD видеокамера ЭВК-003(81)

Благодаря разрешению 1920x1080 пикселей и цифровой обработке Full HD обеспечивает чистое и четкое изображение

EVK-003(81)



разрешающая способность по горизонтали (HDMI) 900 ТВ-линий
4x кратный цифровой ZOOM и функция «СТОП-кадр»
4 набора настроек для разных пользователей

возможность центровки изображения на мониторе
2 программируемые кнопки на камерной головке

Full HD видеокамера ЭВК-003(81)R

Имеет встроенное устройство записи видеоизображения

EVK-003(81)R



все преимущества Full HD камеры
отображение записываемого изображения на вспомогательном мониторе

встроенное устройство записи позволяет записывать видеоизображение на USB накопитель
управление записью кнопками на камерной головке и с пульта

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Светодиодные осветители

Осветитель светодиодный (300 Вт)

NEW



Встроенный
речевой
информатор

полноценный эквива-
лент 300 Вт ксеноно-
вого осветителя

долговечный источник
света срок службы
лампы не менее 30 000 ч

Защита от ослепления
при отсоединении
световодного кабеля

Осветитель светодиодный

OSV-03



полноценный эквива-
лент 200 Вт ксеноно-
вого осветителя

долговечный источник
света срок службы
лампы не менее 30 000 ч

Защита от ослепления
при отсоединении
световодного кабеля

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул.Восстания, 100, корп.41а
т. (843)203-58-38
ф.(843)570-81-46
info@eleps.ru

Инсуффлятор электронный эндоскопический (40 литров)



Инсуффлятор электронный эндоскопический

40 литров

I-250-40AU



Встроенный
речевой
информатор

система форсированной подачи газа до 40 л/мин. при непредвиденной потере давления до достижения заданного уровня

двухцветный по типу «термометра» индикатор входного давления с изменением цвета при нарушении требуемого диапазона входного давления

индикация текущего расхода газа в процентах от установленного

NEW

Аспиратор-ирригатор эндоскопический

AI-250-02L



способен работать с любым профильным инструментом

накопительная емкость снабжена системой аварийной сигнализации и отключения

быстрая смена источников физиологического раствора

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Аппараты электрохирургические высокочастотные

Стабилизация выходной мощности при изменении характеристик рассекаемой и коагулируемой ткани, а также при изменении напряжения питающей сети

Встроенная система автотеста контроля работы аппарата

Аппарат не создает помех на эндоскопическую камеру и телевизионный монитор

Датчики нейтрального электрода и низкочастотной утечки

Запоминание выбранных режимов и последних настроек мощности

Одновременная работа монополярного и биполярного инструмента

Управление педалью и с помощью держателя электродов с кнопочным управлением

Точный выбор мощности

AE-200-02



Вид воздействия	Режим работы	Макс. мощность (Вт)
Резание	Режим 1	200
	Режим 2	200
	Смешанное резание	200
Коагуляция	Монополярная коагуляция	100
	Спрей коагуляция	50
	Биполярная коагуляция	80

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул.Восстания, 100, корп.41а
т. (843)203-58-38
ф.(843)570-81-46
info@eleps.ru

Полноценное импортозамещение
Уникальное соотношение цены и качества
Сервис "Гарантия бесперебойной работы"



AE-300-02



Вид воздействия	Обозначение режима	Режим работы	Макс. мощность (Вт)
Моноплярное резание		Низковольтное резание (Cut Low)	300
		Чистое резание (Cut Pure)	300
		Смешанное резание (Bland)	200
Моноплярная коагуляция		Контактная коагуляция (Low / Desiccate)	120
		Фульгурация (Medium / Fulgurate)	120
		Спрей коагуляция (High / Spray)	120
Моноплярная смесь	1	Резание — 75 % Коагуляция — 25 %	220
	2	Резание — 50 % Коагуляция — 50 %	180
	3	Резание — 25 % Коагуляция — 75 %	140
Биполярная коагуляция	1	Макро режим (Macrobipolar)	90
	2	Стандартный режим (Medium / Standart)	90
	3	Прецизионный режим (Low / Precise)	90

8 800 700 87 03
бесплатный звонок по России
eleps.ru

Стойки аппаратные

СМТ-01



изготовлена из конструкционной стали и алюминиевых профилей

скрытые кабель-каналы для удобства медперсонала

полки с выштамповкой для вентиляции и предотвращения случайного передвижения приборов

колесные опоры из токоизолированного материала с тормозами

2 кронштейна для мониторов: большой диапазон движений, плавное перемещение и возможность фиксации

СМТ-02



предназначена для комплекса лазерной эндоурологии QUASAR

максимальная нагрузка верхней полки до 50 кг

изготовлена из конструкционной стали и алюминиевых профилей

скрытые кабель-каналы для удобства медперсонала

полки с выштамповкой для вентиляции и предотвращения случайного передвижения приборов

колесные опоры из токоизолированного материала с тормозами

поворотной-выдвижной кронштейн для монитора из 3-колен для возможности расположения монитора над самой стойкой, либо над телом пациента

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул. Восстания, 100, корп. 41а
т. (843) 203-58-38
ф. (843) 570-81-46
info@eleps.ru

изготовлена из оцинкованного металла с полимерной окраской

6 полок из текстурированного листового ABS-пластика

токоизолированный материал покрытия колес

тормозная система на 2 колеса

два сетевых фильтра по 6 розеток

кронштейн для монитора по центру стойки



CA-3

изготовлена из оцинкованного металла с полимерной окраской

3 полки из текстурированного листового ABS-пластика с регулируемым расстоянием

токоизолированный материал покрытия колес

тормозная система на 2 колеса

два сетевых фильтра по 6 розеток

кронштейн для монитора по центру стойки



CA-5

8 800 700 87 03
бесплатный звонок по России

eleps.ru


Инструмент лапароскопический

Канюли, троакары, стилеты, торакопорты




LK-02051T1

Канюля эндоскопическая 5 мм (с магнитным клапаном и газоподачей)

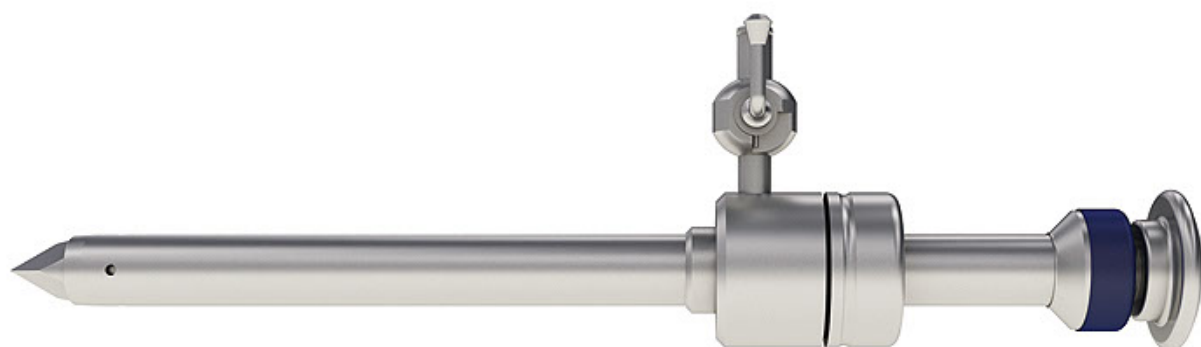

LK-02101T1

Канюля эндоскопическая 10 мм
(с магнитным клапаном и газоподачей)

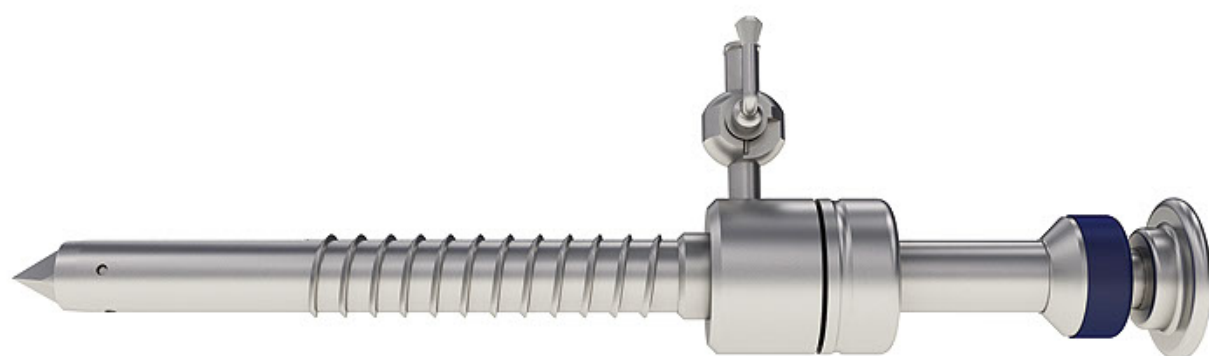

LK-03101T1

Канюля эндоскопическая 10 мм (винтовая,
с магнитным клапаном и газоподачей)

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул. Восстания, 100, корп. 41а
т. (843) 203-58-38
ф. (843) 570-81-46
info@eleps.ru

Канюли



LK-04051T1

Канюля эндоскопическая 5 мм (магнитный клапан, без крана)



LK-03053T1

Канюля эндоскопическая 5 мм (винтовая, с магнитным клапаном, без крана)



LK-03051T1

Канюля эндоскопическая 5 мм (винтовая, с магнитным клапаном и газоподачей)

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

elems.ru



LT-01051	Троакар пирамидальный 5 мм
LT-01101	Троакар пирамидальный 10 мм



LT-02051	Троакар атравматичный 5 мм
LT-02101	Троакар атравматичный 10 мм



LK-01051T1	Канюля эндоскопическая 5 мм (винтовая, бесклапанная) для торокоскопии
LK-01651T1	Канюля эндоскопическая 6,5 мм (винтовая, бесклапанная) для торокоскопии
LK-01101T1	Канюля эндоскопическая 10 мм (винтовая, бесклапанная) для торокоскопии

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул.Восстания, 100, корп.41а
т. (843)203-58-38
ф.(843)570-81-46
info@eleps.ru



LK-1011

Троакар универсальный с газоподачей 10 мм



LK-0516

Троакар универсальный с газоподачей 5 мм



LT-1024

Стилет пирамидальный 10 мм

LT-1024A

Стилет атравматичный 10 мм

LT-0524

Стилет пирамидальный 5 мм

LT-0524A


Стилет атравматичный 5 мм

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Инструмент лапароскопический

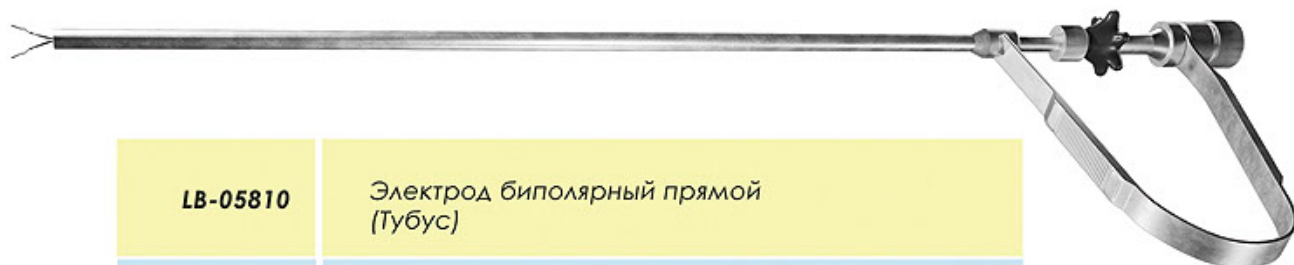

LB-05810	Электрод биполярный прямой (Тубус)	
LB-0581A	Электрод биполярный прямой (тип A)	
LB-0581B	Электрод биполярный прямой (тип B)	
LB-0581C	Электрод биполярный прямой (тип C)	
LB-0581D	Электрод биполярный прямой (тип D)	
LB-0581E	Электрод биполярный прямой (тип E)	
LB-0581F	Электрод биполярный прямой (тип F)	
LB-0586	Электрод биполярный прямой (диссектор)	
LB-0587	Электрод биполярный прямой (зажим анатомический)	
LB-0581K	Держатель биполярных электродов (кабель)	

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул.Восстания, 100, корп.41а
т. (843)203-58-38
ф.(843)570-81-46
info@eleps.ru


Аспираторы-ирригаторы



LA-02001

Инструмент для аспирации и ирригации
(двухходовой, со сменными наконечниками
5 и 10 мм)

Инструменты с пластиковой рукояткой

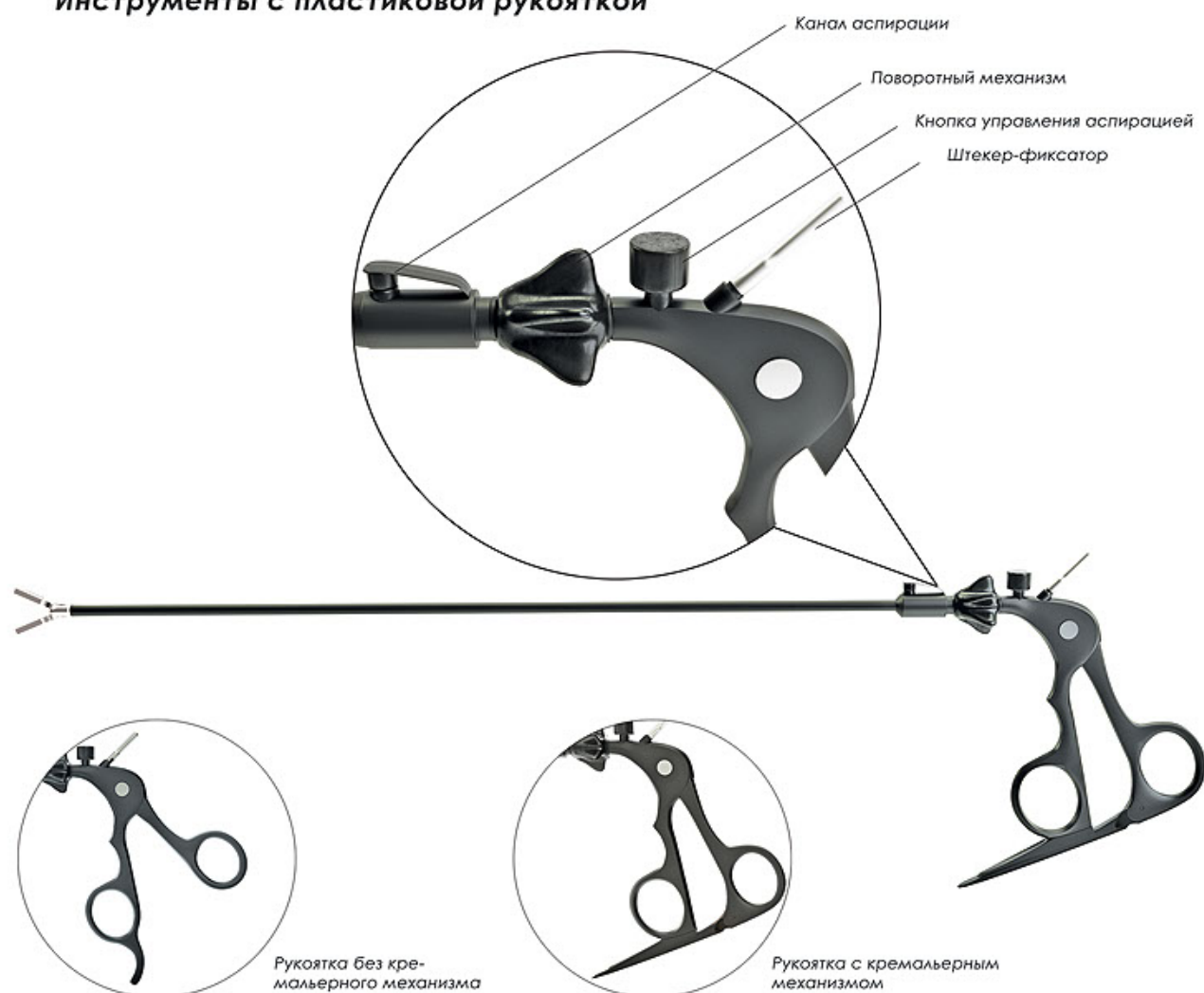

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Инструмент с пластиковой рукояткой

LZ-01053P5	Захватывающие щипцы, атравматичные диаметр 5 мм, рабочая длина 360мм, рукоятка с кремальерой	
LD-02053P3	Диссекционные и захватывающие щипцы, правоиогнутые диаметр 5 мм, рабочая длина 360мм, рукоятка без кремальеры.	
LZ-03053P3	Захватывающие щипцы Бэбкок, диаметр 5 мм, рабочая длина 360 мм, рукоятка без кремальеры	
LZ-03103P3	Захватывающие щипцы Бэбкок, диаметр 10 мм, рабочая длина 360 мм, рукоятка без кремальеры	
LD-04053P3	Прямые диссекционныеи захватывающие щипцы, атравматичные, диаметр 5мм, рабочая длина 360мм, рукоятка без кремальеры	
LZ-04053P5	Захватывающие щипцы по Ману, "зев тигра", 2х4 зуба диаметр 5 мм, рабочая длина 360мм, рукоятка с кремальерой	
LZ-05053P5	Захватывающие щипцы, 2х4 зуба диаметр 5 мм, рабочая длина 360мм, рукоятка с кремальерой.	
LD-06053P3	Биопсийные щипцы по Ману диаметр 5 мм, рабочая длина 360 мм, рукоятка без кремальеры	
LZ-07053P5	Кишечный зажим, фенестрированный, короткий диаметр 5 мм, рабочая длина 360мм, рукоятка с кремальерой	
LD-08053P3	Диссекционные захватывающие щипцы по Келли, диаметр 5 мм, рабочая длина 360мм, рукоятка без кремальеры	

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул. Восстания, 100, корп. 41а
т. (843) 203-58-38
ф. (843) 570-81-46
info@eleps.ru

LS-09053P3	Ножницы, ложкообразные зубчатые бранши, изогнутые диаметр 5 мм, рабочая длина 360 мм, рукоятка без кремальеры.	
LZ-10053P5	Диссекционные захватывающие щипцы «Аллигатор» диаметр 5 мм, рабочая длина 360мм, рукоятка с кремальерой.	
LZ-12053P5	Захватывающие щипцы атравматичные, диаметр 5 мм, рабочая длина 360мм, рукоятка с кремальерой.	
LZ-13053P5	Захватывающий зажим Де Бейки, изогнутые тонкие бранши диаметр 5 мм, рабочая длина 360мм, рукоятка с кремальерой.	
LZ-15103P5	Когтевой зажим, 2х3 зуба, короткий, диаметр 10 мм, рабочая длина 360мм, рукоятка с кремальерой.	
LZ-16103P5	Когтевой зажим, 2х3 зуба, диаметр 10 мм, рабочая длина 360мм, рукоятка с кремальерой.	
LZ-17053P5	Кишечный зажим, фенестрированный диаметр 5 мм, рабочая длина 360мм, рукоятка с кремальерой	
LZ-18053P5	Кроке-Олми захватывающие щипцы, атравматичные, диаметр 5 мм, рабочая длина 360мм, рукоятка с кремальерой	
LZ-19053P5	Зажим для фаллопиевых труб типа Ванкайлли диаметр 5 мм, рабочая длина 360 мм, рукоятка с кремальерой	

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Инструмент с металлической рукояткой

Щипцы, зажимы монополярные*



LD-06053M3	Щипцы эндоскопические поворотные биопсийные 5 мм	
LD-07053M3	Щипцы эндоскопические поворотные биопсийные 5 мм (с иглой)	

LD-01053M3	Зажим монополярный (анатомический для коагуляции) 5мм	
LD-02053M3	Зажим монополярный "Диссектор изогнутый" 5мм	
LD-03053M3	Зажим монополярный "Диссектор прямой малый" 5мм	
LD-04053M3	Зажим монополярный "Диссектор прямой средний" 5мм	
LD-05053M3	Зажим монополярный "Диссектор прямой большой" 5мм	

* инструмент поставляется в комплекте с рукояткой

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул. Восстания, 100, корп. 41а
т. (843) 203-58-38
ф. (843) 570-81-46
info@eleps.ru



Зажимы монополярные с кремальерой*

LZ-01053M5	Зажим эндоскопический удерживающий 5 мм "Полуволна" (анатомический)	
LZ-03053M5	Зажим эндоскопический атравматичный 5 мм "Бэбкок"	
LZ-12053M5	Зажим эндоскопический атравматичный 5 мм "Клинч" (эластичный)	
LZ-04053M5	Зажим эндоскопический захватывающий 5 мм "Кобра"	
LZ-05053M5	Зажим эндоскопический захватывающий 5 мм (когтевой)	
LZ-07053M5	Зажим эндоскопический удерживающий 5 мм (окончатый)	
LZ-08053M5	Зажим эндоскопический атравматичный 5 мм "Эллис"	
LZ-10053M5	Зажим эндоскопический удерживающий 5 мм (универсальный)	
LZ-11053M5	Зажим эндоскопический удерживающий 5 мм (хирургический)	
LZ-13053M5	Зажим эндоскопический удерживающий 5 мм (Де Бейки)	

* инструмент поставляется в комплекте с рукояткой

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Ножницы*




LS-01053M3	Ножницы эндоскопические поворотные с 1-й подвижной браншей 5 мм	
LS-02053M3	Ножницы эндоскопические поворотные с 2-мя подвижными браншами 5 мм	
LS-03053M3	Ножницы эндоскопические поворотные с 2-мя подвижными браншами (укороченные)	
LS-04053M3	Ножницы эндоскопические поворотные с 1-й подвижной браншей, изогнутые (правые) 5 мм	
LS-05053M3	Ножницы эндоскопические поворотные с 1-й подвижной браншей, изогнутые (левые) 5 мм	
LS-06053M3	Ножницы эндоскопические поворотные с 1-й подвижной браншей, изогнутые (по ребру) 5 мм	
LS-09053M3	Ножницы эндоскопические поворотные с 2-мя подвижными браншами, изогнутые 5 мм	
LS-08053M3	Ножницы эндоскопические поворотные с 1-ой подвижной браншей, прямые клювовидные 5мм	

* инструмент поставляется в комплекте с рукояткой

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул.Восстания, 100, корп.41а
т. (843)203-58-38
ф.(843)570-81-46
info@eleps.ru

Монополярные электроды

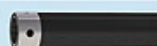


LM-01053	Электрод шар	
LM-02053	Электрод игла изогнутая	
LM-03053	Электрод нож прямой ("Лопатка")	
LM-04051	Электрод монополярный с аспирационным каналом ("Кольцо")	
LM-05053	Электрод монополярный с аспирационным каналом ("Кольцо" с краном)	
LM-06051	Электрод монополярный с аспирационным каналом (игла изогнутая)	
LM-07051	Электрод монополярный с аспирационным каналом (игла изогнутая с краном)	
LM-08051	Электрод монополярный с аспирационным каналом ("Лопатка" с краном)	
LM-09051	Электрод монополярный с аспирационным каналом ("Лопатка" со штуцером)	
LM-01052	Электрод монополярный с аспирационным каналом (электрод "Шар" с краном)	
LM-11053	Электрод игла изогнутая (для вылушивания кист)	




LM-10051	Электрод - нож прямой (скальпель монополярный лапароскопический по Жумагалиеву)	
----------	---	--

Иглы

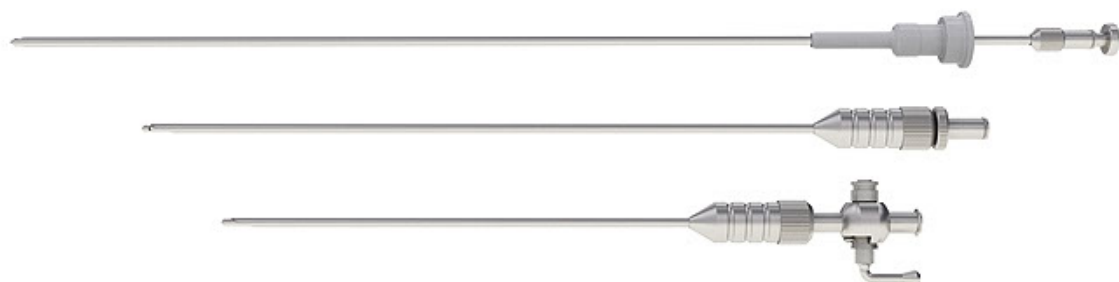

LN-1	Игла эндоскопическая биопсийная
LN-2	Игла эндоскопическая инсуффляционная (для пневмоперитонеума по Veress) 125 мм
LN-2K	Игла эндоскопическая инсуффляционная (для пневмоперитонеума по Veress) с краном 125 мм
LN-2K1	Игла эндоскопическая инсуффляционная (для пневмоперитонеума по Veress) с краном 150 мм

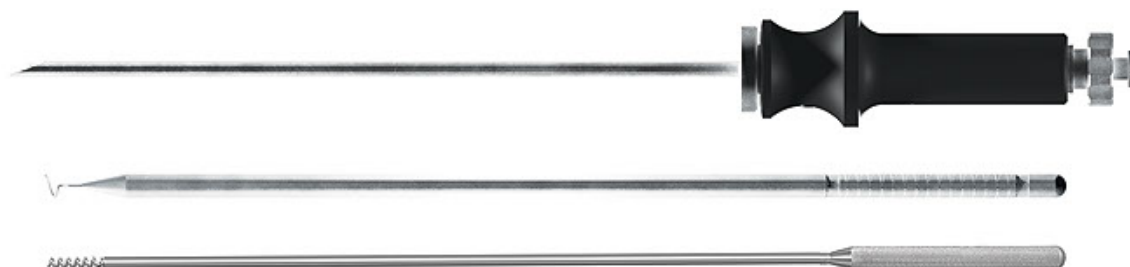

LN-9	Игла эндоскопическая ушивающая (прямая)
LN-7	Игла эндоскопическая ушивающая (спиралевидная правая)
LN-6	Игла эндоскопическая ушивающая (спиралевидная левая)
EN-02	Игла эндоскопическая (для удаления миоматозных узлов 5 мм)
EN-03	Игла эндоскопическая (для удаления миоматозных узлов 10 мм)

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул.Восстания, 100, корп.41а
т. (843)203-58-38
ф.(843)570-81-46
info@eleps.ru



LI-02051

Инструмент для удержания игл
(с прямыми браншами)



LI-03051

Инструмент для удержания игл
(иглоприемник)



LI-02110

Инструмент для опускания узлов



LI-02111

Инструмент для затягивания узлов

ЭНДОДЕЗ



Современное стерилизующее и дезинфицирующее средство для эндоскопов, эндоскопических инструментов и оборудования

В связи с частыми ошибками при обработке оптических трубок для эндоскопических манипуляций, приводящими к выходу их из строя, а также вопросами, связанными с обработкой оптики, нами разработано специальное средство для стерилизации и дезинфекции оптических трубок, инструментов и оборудования для эндоскопии.

Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Средство сохраняет свои свойства после заморозания и дальнейшего оттаивания. Рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны.

Режим дезинфекции ручным способом

Виды изделий	Режим обработки		Способ обработки
	Концентрация рабочего раствора по препарату (%)	Экспозиция (мин)	
Эндоскопы жесткие и гибкие	0,25	60	Погружение
	0,5	30	
	1,0	15	
Инструменты для эндоскопов	0,25	45	
	0,5	20	
	1,0	10	

Режим дезинфекции, совмещенный с предстерилизационной очисткой жестких и гибких эндоскопов

Этапы обработки изделий	Режим обработки		
	Концентрация рабочего раствора по препарату (%)	Температура раствора	Экспозиция (мин)
Замачивание при полном погружении и заполнении каналов	0,25 0,5 1,0	Не ниже +18°С	60 30 15
Мойка изделий с мойкой и чистой водой	В растворе где производилось замачивание	Не ниже +18°С	2-3
Ополаскивание проточной питьевой водой	Не нормировано	Не нормировано	5
Ополаскивание проточной дистиллированной водой	Не нормировано	Не нормировано	1

Режим ДВУ и стерилизации жестких и гибких эндоскопов

Виды обработки изделий	Режим обработки		
	Концентрация рабочего раствора по препарату (%)	Температура раствора	Экспозиция (мин)
Дезинфекция высокого уровня (ДВУ)	3,0	Не ниже +18°С	30
	4,0		15
	6,0		5
Стерилизация эндоскопа	3,0	Не ниже +18°С	60
	4,0		30
	5,0		15
	6,0		5

* Полные рекомендации по применению средства "ЭНДОДЕЗ" содержатся в инструкции по применению для персонала ЛПУ и пр. учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.



ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, ул.Восстания, 100, корп.41а
т. (843)203-58-38
ф.(843)570-81-46
info@eleps.ru

8 800 700 87 03
бесплатный звонок по России
eleps.ru